

SISSEL[®] TERAPIA FRIA COMPRESSÃO



**Manual de
funcionamento**



*Com o SISSEL® **espr de Terapia Fria** comprou um dispositivo de assistência universalmente aplicável para problemas articulares ou lesões.*

Uma boa Decisão, obrigado.

A **compressão @ Terapia Fria** do SISSEL é uma compressa fria inflável para o joelho/ cotovelo, pulso e tornozelo, que tem a forma de uma ligadura articular. Pode ser aplicado para tratar lesões agudas (ligamentos, articulações) e inchaço, e dores ou dores súbitas OU crónicas nas articulações (por exemplo, dores reumáticas). Também pode apoiar tratamentos e aplicações terapêuticas.

A combinação de frio e pressão em forma de ligadura é muito eficaz. O frio é conhecido por reduzir a dor e o inchaço. A compressão suporta e estabiliza, aumentando a eficácia do frio. O inchaço, por exemplo, pode ser evitado de forma mais eficaz ou claramente reduzido. A almofada interior livremente removível pode ser guardada no frigorífico ou no congelador.

Frio e Compressão combinados

Vantagens num ápice:

- redução fiável da dor e inflamação
- frio e compressão proporcionam uma prevenção abrangente do inchaço
- estabilização articular adicional de lesões desportivas, entorses, etc.
- com bomba para regulação da pressão
- Slow Flow Gel proporciona uma conservação de temperatura duradoura e segura
- fecho conveniente de velcro, ajusta-se perfeitamente à articulação
- higiénico e fácil de desinfetar
- pode ser aplicado em cima da roupa em caso de emergência
- disponível em 3 variações: pulso, joelho/cotovelo, tornozelo

Indicação:

- inflamações
- inchaços
- dores
- lesões desportivas
- condições reumáticas

Contraindicação:

- Não utilizar em caso de resultados indefinidos. Consulte o seu médico ou terapeuta.
- Não aplique a feridas ou ferimentos abertos (possivelmente cubra primeiro).

Material / Aplicação

Material:

cobrir

<i>preto</i>	<i>azul</i>	Conteúdo
100% de nylon velours	65% Poliéster 35% Algodão	Celulose Aquadest

Instruções de cuidado : Limpe com uma toalha húmida e seque.



Desinfeção: Pulverizar ou limpar a desinfeção. Pulverizar, deixar molhar, limpar, se necessário. Utilize apenas produtos de limpeza adequados.

Temperatura: Guarde a compressa (máx. – 18°) no seu congelador ou frigorífico para garantir que o produto está pronto a ser utilizado. Quanto menor for a temperatura, maior a eficácia do reservatório frio.

Aviso: Temperaturas demasiado baixas podem causar danos à pele! Se for possível, proteja a pele com uma toalha.

Aplicar / Remover compressa

▪ Aplicar

1. colocar compressa, fechar fecho de velcro (1)
2. válvula aberta ("ON")
3. insuflado (3)
4. ajustar se desejar. Válvula de libertação de imprensa (4)
5. válvula de fecho ("OFF") (2)
6. remover o tubo, se desejar


Nota:

Não insufla a compressa com demasiada força, garanta um posicionamento adequado, não se coloque muito solto. A articulação deve estar localizada na abertura da articulação (para compressa do joelho e cotovelo)



▪ Remover

1. válvula aberta ("ON") (2)
2. libertar ar
 - válvula de libertação de imprensa ou (4)
 - remover tubo (5)
3. fechos abertos de velcro, remover compressa, (1)
4. espremer o restante ar

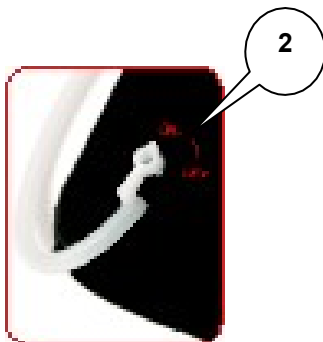

SISSEL® GmbH

Bruchstrasse 48

D-67098 Bad Dürkheim

Alemanha

www.sissel.com



The natural way of Sweden