



BANCO DE TRANSFERÊNCIA

Manual de instruções

812082

CE

Símbolo que figura no rótulo ou no manual de instruções

	Endereço do fabricante:		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número de lote		Conformidad CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

INSTRUÇÕES MANUAL PT

IMPORTANT

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.


Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos. Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um dispositivo de assistência. Ele ou ela irá aconselhá-lo sobre o uso mais adequado para você.

Distribuidor: Este manual deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUCT

A cadeira de transferência é um dispositivo médico para pessoas com mobilidade reduzida. Permite-lhe sentar-se confortavelmente fora da sua banheira e deslizar para dentro dela sem se levantar. Está equipado com um espaço para colocar os seus produtos de duche ao alcance fácil. Pode ser usado na maioria das banheiras padrão. Mantenha-se sentado e deslize para o centro do seu banho graças à nossa cadeira de transferência.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

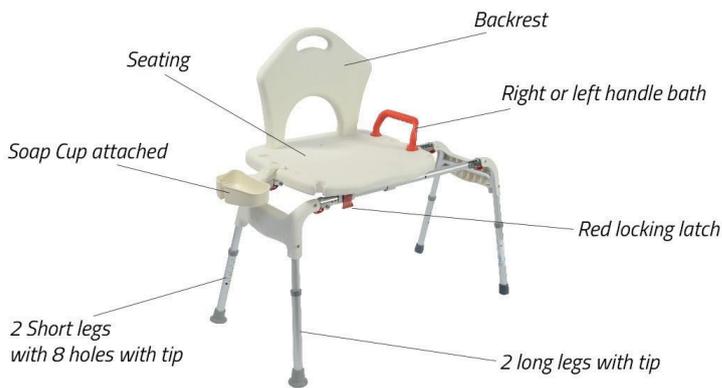


SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Certifique-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.
- Não se apoie no travesseiro ao entrar ou sair da banheira.
- Verifique se todas as peças estão bloqueadas no lugar.
- Certifique-se de que o utilizador bloqueia a trava o banco.
- Se alguma peça estiver danificada, partida, gasta ou em falta, contacte o seu concessionário.


MONTAGEM

1. Abra a cadeira e insira os pés até ouvir o «clique» garantindo uma boa montagem.
2. Encaixe como mostrado em 2.
3. Ajuste os pés à altura desejada e adaptados ao utilizador.
4. Insira o encosto pressionando fortemente para baixo.
5. Fixe a pega como indicado no ponto 5.
6. Posicione a saboneteira como indicado no ponto 6.

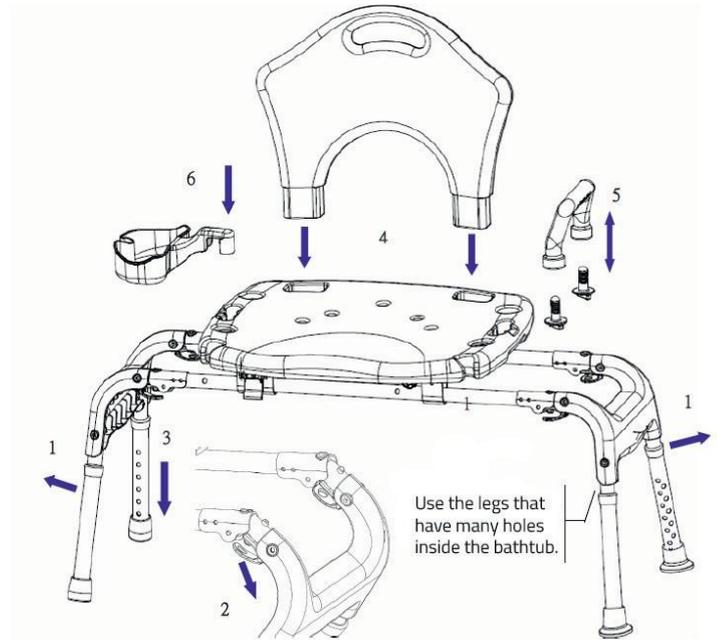

UTILIZAÇÃO

1. Puxe a alça vermelha localizada sob o assento para deslizar o assento lateralmente sobre o quadro até a posição.
2. Para manutenção, use água e sabão. Enxaguar bem antes de usar.

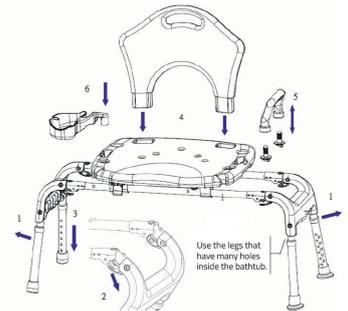

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco.
- Em caso de avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAMENTO



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
 - Em lugar seco e temperado
 - Proteja o seu produto embalando contra poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
 - Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
 - Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os componentes do produto, não emperre nada...).

PERIODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões globais	largura 106 cm x profundidade 46,5 cm x altura 79,5/99,5 cm
Dimensões do banco	largura 50 cm x profundidade 46,5 cm x altura 46/68,5 cm
Materiais	Estrutura de alumínio anticorrosão
Folga máxima do pavimento	62 centímetros
Peso	6,5 kg
Peso máximo autorizado	130 quilogramas

GUARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités - ZA Pôle 49
Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'Anjou



Poids máxima autorisé Peso
máximo autorizado Peso
máximo permitido
130 quilogramas

