

BENGALA ESTABILIZADA
BENGALA ESTABILIZADA
Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF^a : 816200.BLEU-816200. NOIR-816200. ROUGE-816200. VIOLETA



Modèle maleável



Hauteur réglable



Auto-posicionamento

SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

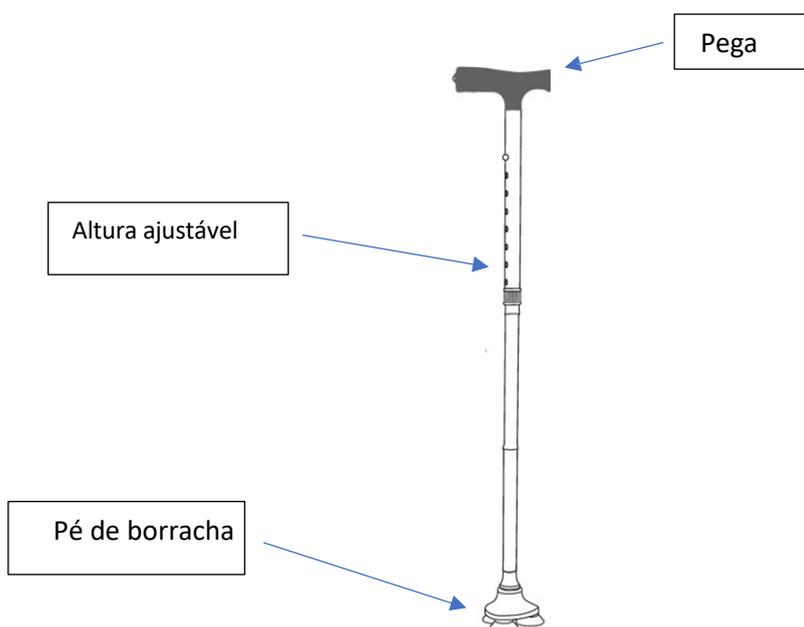
Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

As bengalas Stabilicane são auxiliares de marcha para pessoas com mobilidade reduzida. São dobráveis e fáceis de transportar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



-Design dobrável para fácil transporte e armazenamento com pega ergonómica.

-A base da bengala apresenta um design de "junta esférica giratória" para maior aderência e apresenta um design de 3 pés de borracha para maior estabilidade, garantindo proteção contra superfícies molhadas.

- Oito alturas ajustáveis de 77,47 cm a 94,99 cm. Perfeito para pessoas entre 1,52 e 2,01 metros de altura.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



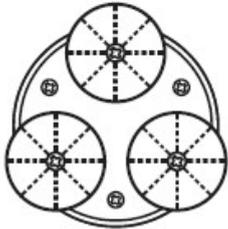
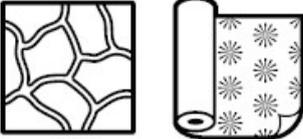
O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 150 kg.
- Utilize apenas acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Inspeccionar visualmente o estado geral do produto (tubo, pega, pé).
- Não utilize a bengala se o cordão estiver danificado; Verifique a elasticidade do cordão antes de cada utilização.
- A bengala não se destina a suportar totalmente o peso de uma pessoa.
- Certifique-se de que todas as peças estão fixadas de forma segura e em boas condições de funcionamento.
- Não faça quaisquer ajustes no produto enquanto estiver a ser utilizado.
- Apoia-se sempre na pega para obter apoio.
- Em caso de peças danificadas, partidas ou gastas, contacte o concessionário.

- Consulte um médico antes de usar um andador.
- Não utilize a bengala a menos que os segmentos e botões estejam seguros e apertados para travar no lugar.
- Quando endireitado, mantenha os dedos afastados dos segmentos para evitar beliscar.
- Não estique o cordão elástico interno mais do que o necessário.
- Não utilize a bengala se o cordão elástico estiver cortado ou danificado.
- Não utilize a bengala se o cabo ou o pé da bengala se soltarem.
- A bengala não foi concebida para ser utilizada em superfícies escorregadias ou molhadas.

ADVERTÊNCIA




Não desmonte o corpo do poste. Ao fazê-lo, danificará o cordão elástico no interior da bengala e a liberação descontrolada do cordão elástico poderá causar lesões graves.

<p>Não puxar demasiado os segmentos e esticar o cordão elástico</p> 	<p>Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados na parte inferior da cana. Substituir o pé de 6 em 6</p> 	<p>A bengala foi concebida para se adaptar a muitos ambientes, mas certifique-se de que não utiliza a sua bengala em superfícies como estas:</p>  <p>Pavimentos irregulares Tapetes de chão</p>
---	---	--


MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

MONTAGEM

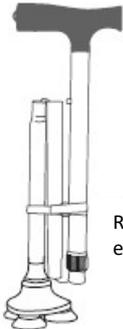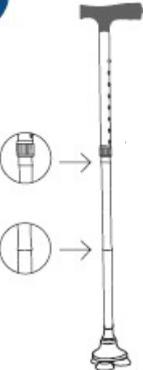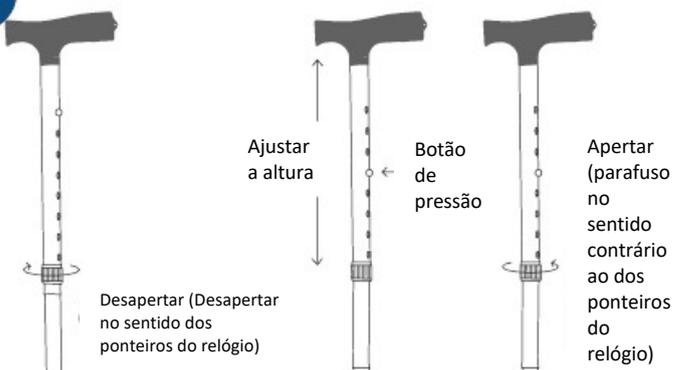Configurando sua bengala:


<p>1</p>  <p>Retirar da embalagem</p>	<p>2</p>  <p>Desabotoar a cinta</p>	<p>3</p>  <p>Desdobrar</p>
<p>4</p>  <p>Importante: Verificar se todas as juntas estão seguras</p>	<p>5</p>  <p>Ajustar a altura</p> <p>Botão de pressão</p> <p>Apertar (parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio)</p> <p>Desapertar (Desapertar no sentido dos ponteiros do relógio)</p>	

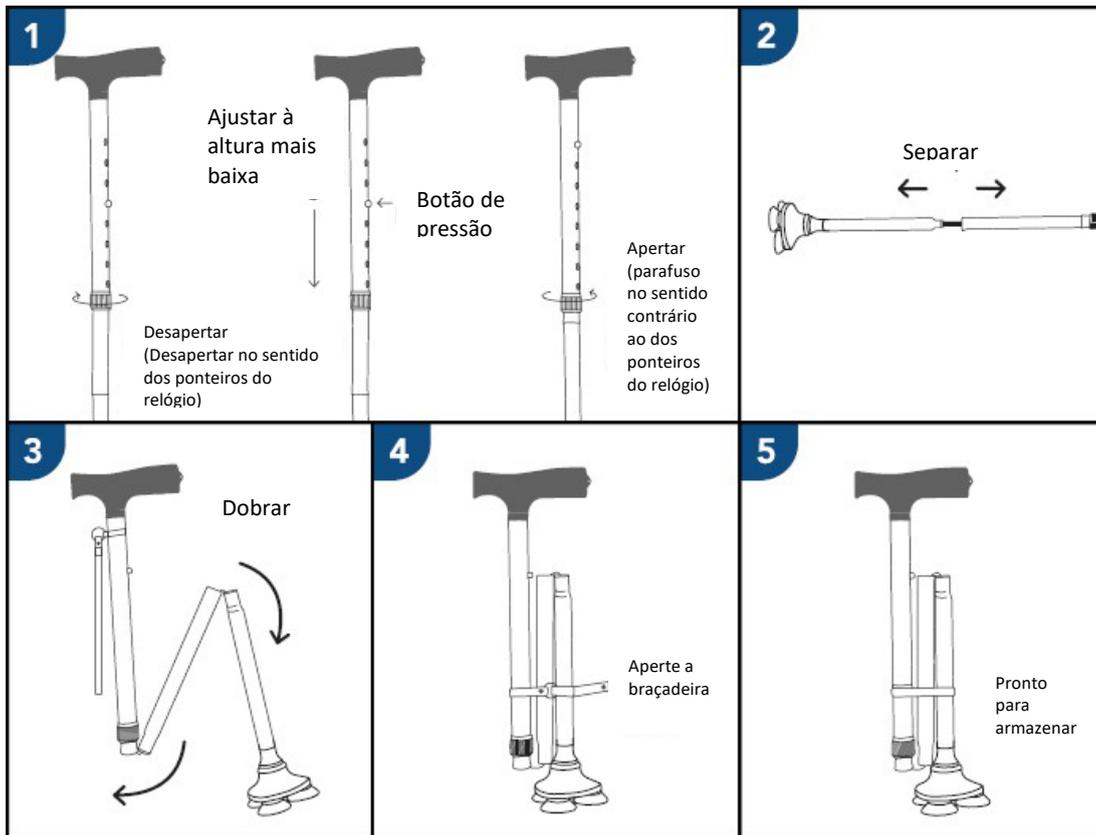Armazenamento da Bengala



UTILIZAÇÃO

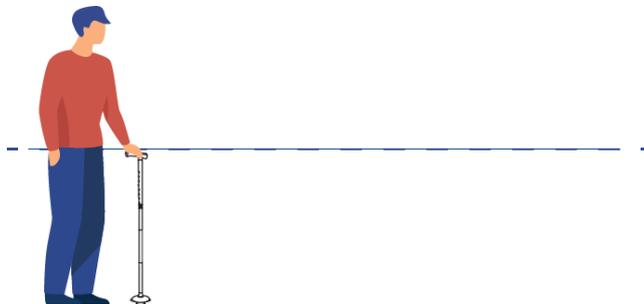Para usar o produto, apoie-se na alça. Se necessário, ajuste a altura. Avançar devagar. A altura da bengala pode ser ajustada entre 77 e 94 cm. A melhor altura para a sua bengala é a altura dos seus quadris.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.
- Seque com um pano macio, limpo e seco para evitar a oxidação.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade ou detritos à volta das tampas finais.
- Verifique se os parafusos dos pés de borracha estão apertados; Caso contrário, use uma chave de fenda para apertar os pés para o uso correto. Substitua os pés de borracha se já não estiverem a funcionar corretamente.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar os materiais de alumínio e poliamida.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todas as fixações, pegas e pés de borracha.
- Antes de cada utilização, verifique se a tampa de borracha está em boas condições.
- Em caso de avaria, não repare o produto por conta própria. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- Em lugar seco e temperado
- Proteja seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Em todas as dimensões	Comprimento 77,47 a 94,99 cm em 8 posições
Peso máximo suportado	150 quilogramas

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições. Se o dispositivo for usado em um ambiente multiusuário (como uma casa de repouso ou hospital), a vida útil pode ser reduzida.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA
Polo 49 Bd de la
Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Peso máximo permitido
Peso máximo usuario
150 quilogramas